



ACTUALITZACIÓ IMPLANTACIÓ TABLETS TSU – ECDE SEM

Abril 2019

Unitats diana:

- N401 (USVAi Hospital Municipal de Badalona; 24h)
- N726 (USVB Base Badalona; 24h)
- N729 (USVB Base Sta. Coloma; 24h)

NOVETATS MÉS IMPORTANTS

- Instal·lació app nova (Guies Clínicas per USV TSU).
- Actualització ECDE 2.0 per USVB i USVA/I:
 - Nou disseny intuïtiu
 - Accés HC3 en ECDE USVA/I
 - Transferència de fitxers entre USV (enviament i descarga en pdf)
- Instal·lació impressora en USVA/I connectada a tablet per l'obtenció d'informes físics, en casos d'alta voluntària/mèdica, defunció i en afectats sense CIP (no beneficiaris de la prestació del CatSalut).





Noves funcions de l'estació clínica d'emergències 2.0. Abril 2019

Aquesta nova versió conté un disseny totalment diferent, més usable, modificable i fàcil de mantenir, pensant amb les noves opcions que anirem veient en la present i en les properes versions.

No obstant, les pantalles i els camps que mostra són força semblants.

1. Canvis a l'entorn SVA i SVB

Després de realitzar un login, escollir unitat i reomplir equip de treball, anem a la pàgina inicial, on ens mostra els informes desats.

Veiem un menú a la part esquerra de la pantalla. On es troba la safata de SITREM, l'informe OffLine. L'estat de les connexions, per saber si de debò tenim connectivitat, també es mostra altres opcions de connectivitat que només afecten a les unitat SVAm i SVAi.

Data	Informe	Estat
HC3	Unitat	Nom afectat
	Adreça	Núm. af.
		Data
No	A601	c. Vallespir, del N° 35
		390000160
		20/02/2019 13:32:01

A la part superior esquerra d'aquesta pantalla, tenim tres símbols .




- El primer (a l'esquerra) serveix per canviar el password.
- Les sagetes del centre, per canviar l'equip de treball.
- I el de la dreta, per sortir de la sessió fent un logout.



El requadre que es mostra al centre, serveix per mostrar o amagar el menú principal de l'esquerra.



La safata de Sitrem es mostra de manera molt semblant.

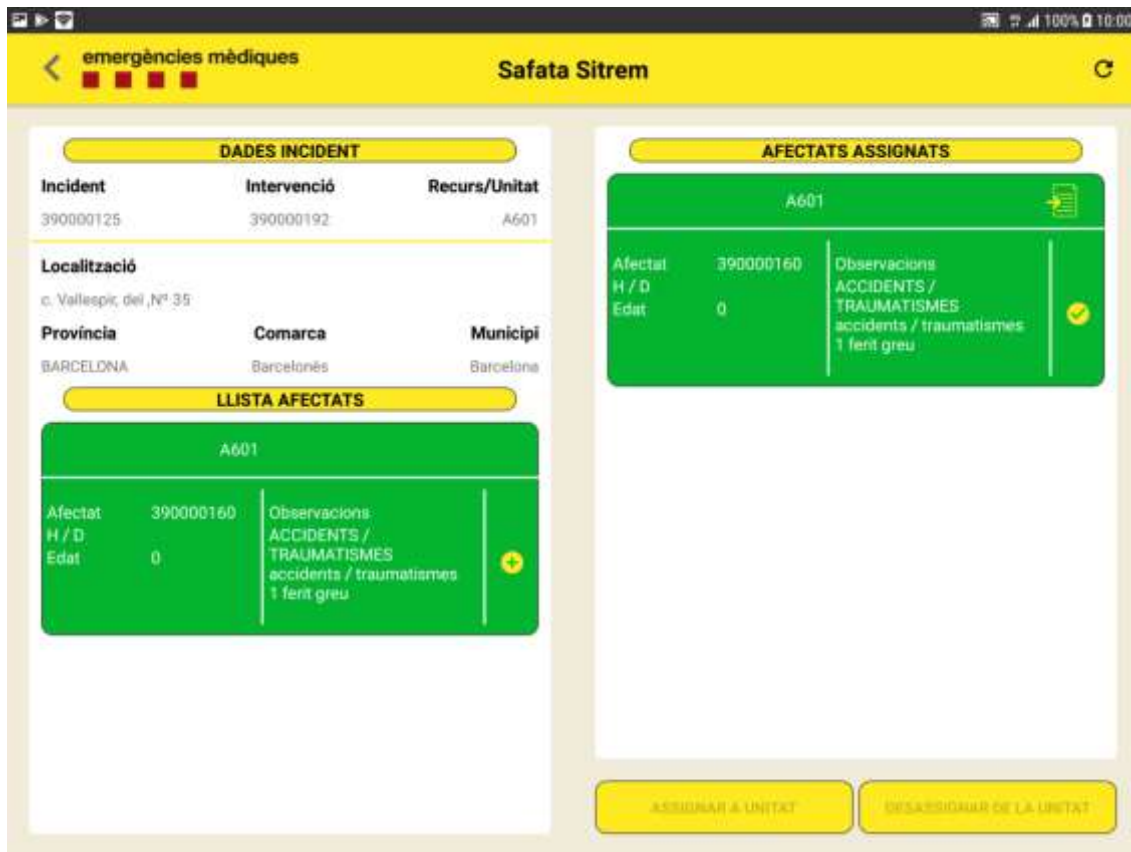

La diferència està en que inicialment s'actualitza sola.



però la sageta circular que es mostra a la cantonada superior dreta, igualment ens permet actualitzar quan ens faci falta.




Es pot obrir l'informe com abans, mantenint el dit sobre el rectangle verd de l'afectat assignat, o prement un instant la carpeta groga que es mostra a la última captura.



Un cop dins l'informe, es pot obrir el menú d'opcions d'informe (3 punts de la cantonada superior dreta).

A part de les opcions habituals podem trobar la nova opció d'altres informes. Una nova funcionalitat que serveix per mostrar els informes d'altres unitats involucrades al mateix afectat i incident.

Cal tenir en compte que per a funcionar correctament, la tablet de l'altre unitat ha d'haver enviat l'informe i la nostra tablet ha d'haver actualitzat l'enviament de dades temporals.

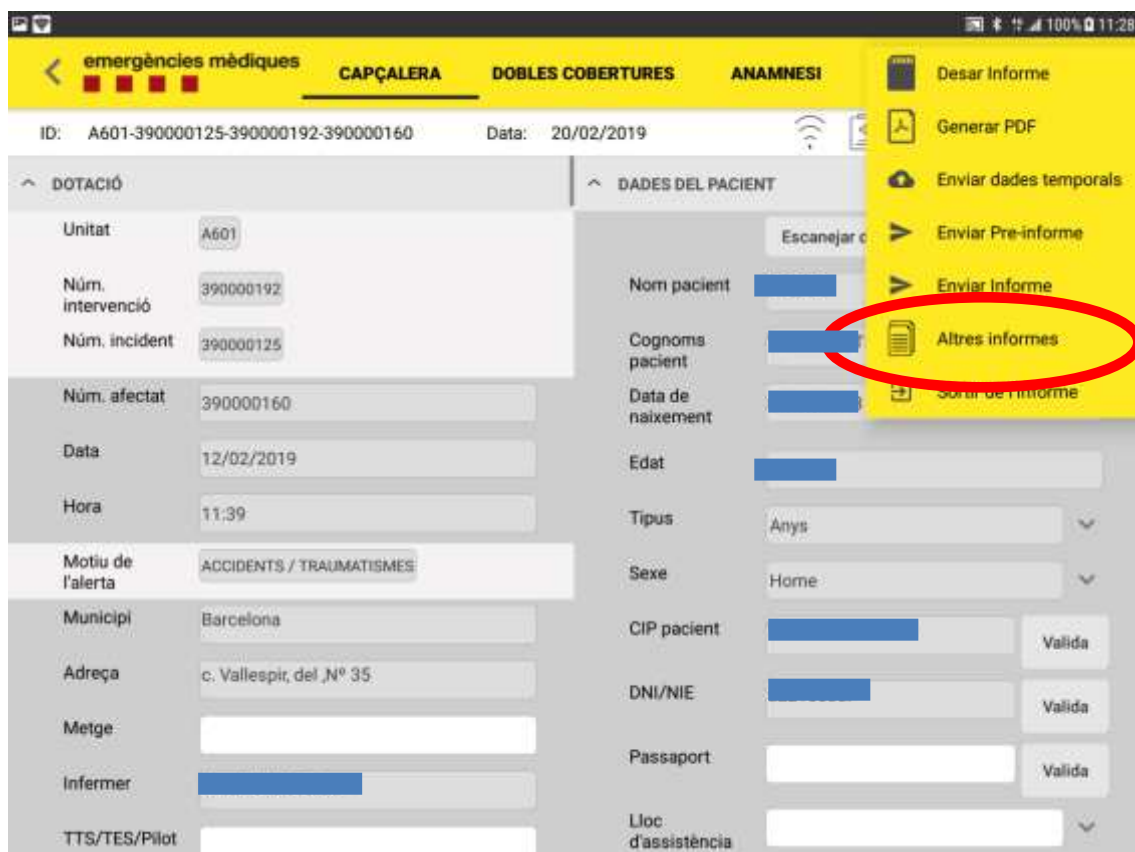

Aquí trobarem tots els informes que han estat enviats per altres unitats, i també el de la nostra unitat. I ens permetrà obrir un PDF per consultar l'informe. Com és de sentit comú, aquests informes d'altres assistencials, no es poden eliminar, ni editar.



El disseny de les pantalles de l'informe que estem reomplint nosaltres, porta una capçalera amb el títol de la pantalla actual com a la versió anterior, però s'ha afegit una segona capçalera amb més informació rellevant. Un ID de l'informe únic, que és:

- La unitat - codi d'incident – codi d'intervenció – codi d'afectat,
- La data
- I tots els símbols referents a la connectivitat que veiem al menú principal.

2. Canvis a l'entorn SVA.


El segon símbol de la barra. És la consulta a la història clínica compartida HC3.



Que podem veure a la nova capçalera. Si està sense la ratlla vermella és que tenim connectivitat amb l'HC3.




Si premem al símbol se'ns obra el HC3 del pacient. (Abans, cal que tinguem informat i validat el CIP del pacient). L'ús inadequat d'aquesta nova funció, és sota la responsabilitat de cadascú.

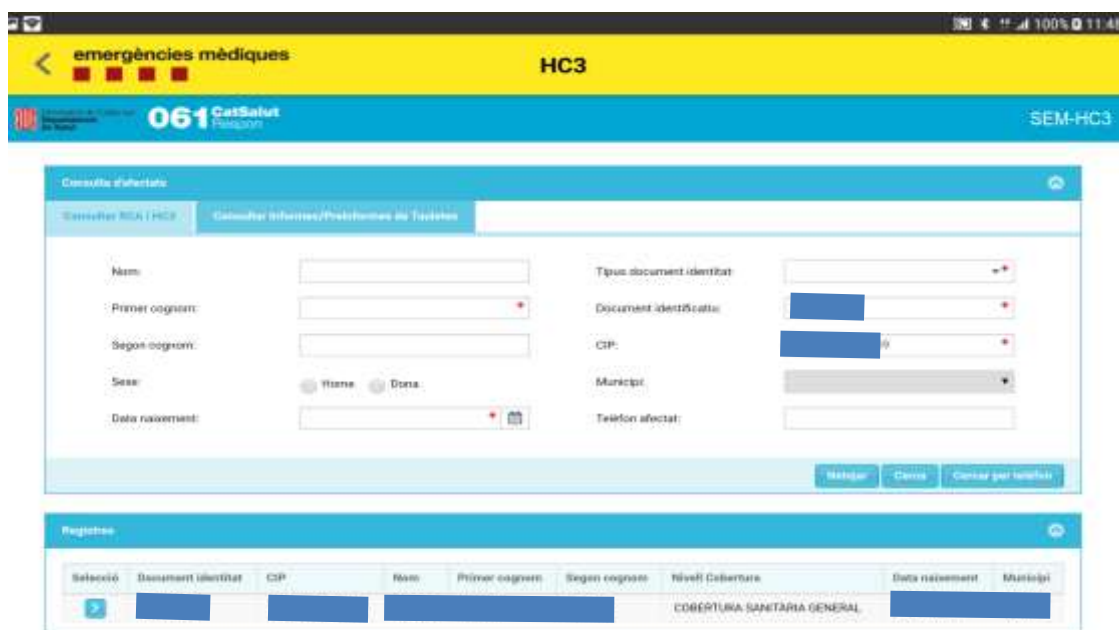



Un cop se selecciona l'afectat (només se'n mostrarà un), arribem al resum amb tots els informes del pacient. Podem obrir el PDF que sigui necessari.

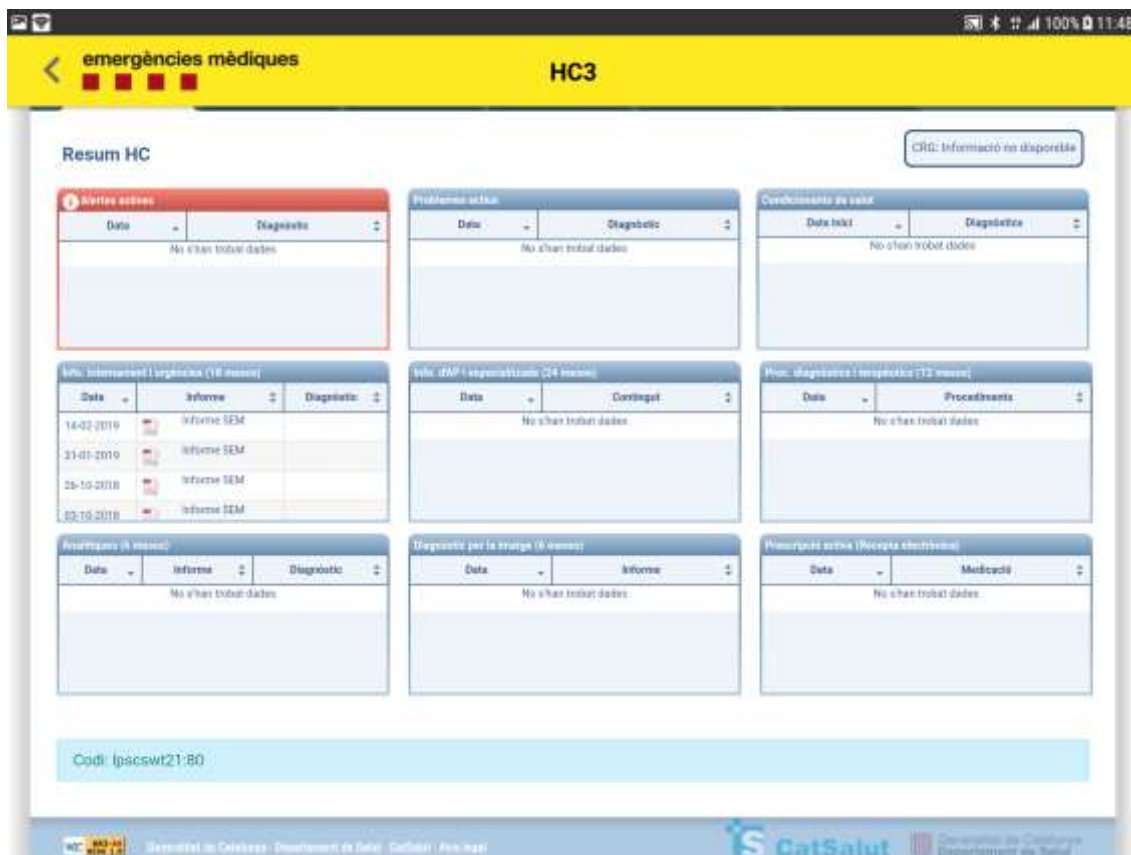

L'altre nova opció que només es permet si es porta una impressora bluetooth a l'ambulància, és la impressió de l'informe assistencial.


Abans caldrà generar el PDF de l'informe. Segona opció del menú d'opcions d'informe



emergències mèdiques



I s'obrirà l'informe en format PDF, a la cantonada superior dreta hi ha la icona de la impressora, que si la impressora està engegada, té connectivitat bluetooth i es troba configurada a l'aplicació, es procedirà a imprimir l'informe sencer .

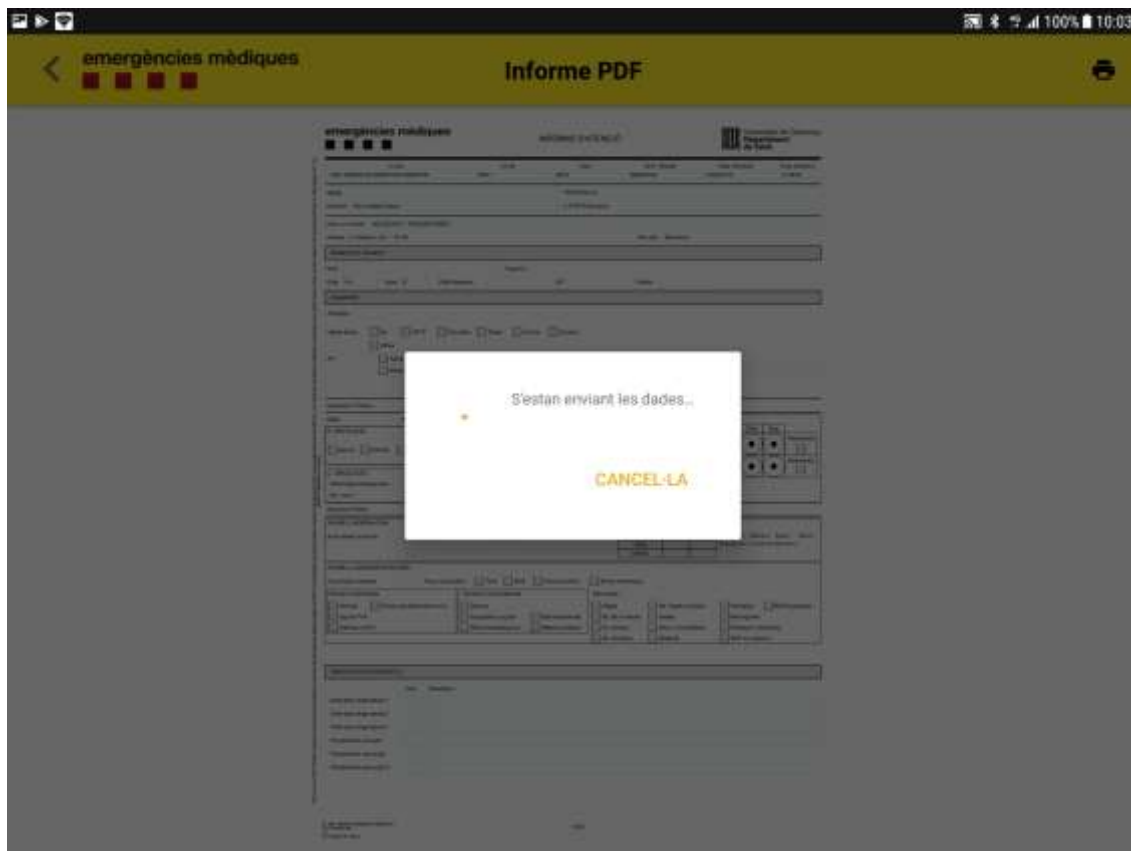

Un cop imprès l'informe, es mostra el missatge d'informe imprès correctament i cal prémer acceptar.



I sortir de l'informe PDF. Mitjançant el Símbol < de la cantonada superior esquerra.







Per qualsevol problema d'impressió cal tenir en compte els següents passos:

- Engagar impressora i veure que el paper es trobi preparat i els llums encesos.
 - Els leds; Power encès, status parpellejant i el de bluetooth també encès. Si aquest últim es troba apagat, hi ha un botó proper al botó de posar en marxa la impressora que activa o desactiva el bluetooth.



- Assegurar que la Tablet tingui encesa la connexió bluetooth. 
- Prémer la icona d'impressora de la pantalla principal. 



emergències mèdiques



- Assegurar que tenim una impressora disponible i si la tenim, premem-la per a que es mostri com a connectada.



- Un cop connectada, opcionalment, podem fer una prova d'impressió amb el botó de prova d'impressió.

ja podem sortir d'aquesta opció amb el símbol < de la part superior esquerra, i anar al menú de generació del PDF per poder seguir intentant la impressió de l'informe.